



Az Esteem™ termékcsalád választéka

Zárt zsákok

TB támogatott

megnevezés	méret (mm)	kiszerezés (db/doboz)	termékkód
Esteem testszínű zárt zsák, közepes	20-70 mm (kivágható)	30	404707CO
Esteem átlátszó zárt zsák, közepes	20-70 mm (kivágható)	30	404714CO
Esteem testszínű zárt zsák, nagy	20-70 mm (kivágható)	30	404721CO
Esteem átlátszó zárt zsák, nagy	20-70 mm (kivágható)	30	404728CO
Esteem testszínű zárt zsák, nagy	25 mm	30	404722CO
Esteem testszínű zárt zsák, nagy	30 mm	30	404723CO
Esteem testszínű zárt zsák, nagy	40 mm	30	404724CO
Esteem testszínű zárt zsák, nagy	50 mm	30	404725CO

Nyitott zsákok

TB támogatott

megnevezés	méret (mm)	kiszerezés (db/doboz)	termékkód
Esteem testszínű nyitott zsák, közepes	20-70 mm (kivágható)	10	405836CO
Esteem átlátszó nyitott zsák, közepes	20-70 mm (kivágható)	10	405835CO
Esteem testszínű nyitott zsák, nagy	20-70 mm (kivágható)	10	405850CO
Esteem átlátszó nyitott zsák, nagy	20-70 mm (kivágható)	10	405843CO

Gyártja: ConvaTec

Forgalmazza: Replant 4 Care Kft.

Kérdésével hívja vevőszolgálatunkat:

06-1 / 374-9081

A prospektusban szereplő termékek gyógyászati segédeszközök. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát. • Lezárás dátuma: 2008. július



Esteem™

egyrészes sztómaterápiás rendszer

Esteem™
Tapasztalatokon alapuló technológia



Szabályozhatóság

Szűrő

„Tudom, hogy gázok és kellemetlen szagok áramolhatnak a sztómából.

Jó tudni, hogy van valami, amivel ez szabályozható.”


Modern szűrő

- A szűrő speciális anyaga biztosítja annak hatásos működését és magas hatékonyságát.
- A szűrőn keresztüli gázkiáramlást szabályozó egyszerű mechanizmus minimalizálja a gázkiáramlással járó problémákat.
- Az öntapadó, kör alakú lapocskával a szűrő nyílásai különbözőképpen takarhatóak le, így a gázkiáramlás szabályozható.
- A beteg önbizalma növelésének könnyű és nagyon hatékony módja a kellemetlen szagok zsákból való kiáramlásának csökkentése.


Egyedi ellenőrzési rendszer

- A modern szűrő egyedi lehetőséget nyújt a zsákokból kiáramló gázok és szagok szabályozásához.

Esteem™ szűrő szerkezete

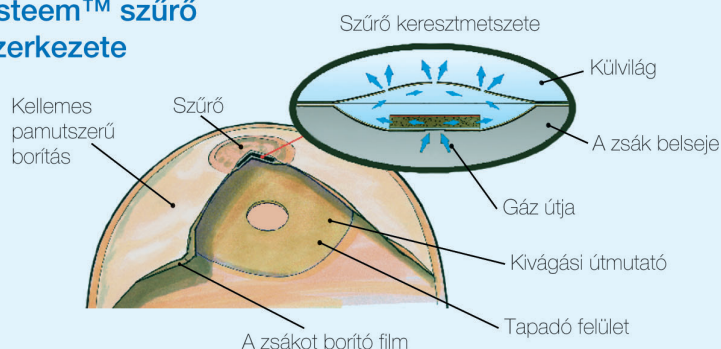

Maximális gázkiáramlás

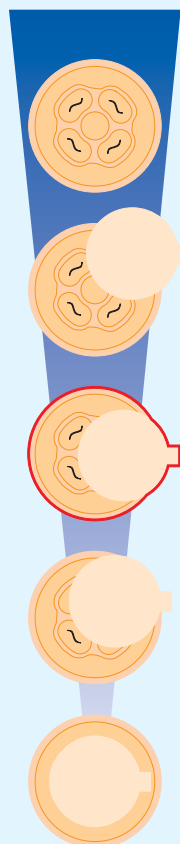

Nincs gázkiáramlás

A szabályozható szűrő működése

Nincs letakart nyílás

- Maximális gázkiáramlás
- A zsák felfújódásának minimális a kockázata

1 letakart nyílás

- Aktív gázkiáramlás
- A zsák felfújódásának kicsi a kockázata

2 letakart nyílás

- A zsák összetapadásának kicsi a kockázata
- **JAVASOLT KIINDULÁSI HELYZET**

3 letakart nyílás

- Enyhe gázkiáramlás
- A zsák összetapadásának minimális a kockázata

4 letakart nyílás

- Gáz nem távozik a szűrőn keresztül
- Az összetapadásnak a legkisebb a kockázata
- Fürdéshez és zuhanyzáshoz alkalmas

Biztonság és kényelem

Zsák

„Minden ileosztómás beteg tart attól, hogy a zsák leválhat a bőrről.

A ConvaTec termékek használatakor biztonságban érezhetem magam.”

„Nincs két ugyanolyan beteg. Ezért fontos a megfelelő zsák kiválasztása a beteg számára...hiszen nem a betegnek kell igazodnia a zsákhoz.”

A speciális tapadó felület, amelyet az Esteem™ zsákoknál használnak, biztonságot és kényelmet nyújt, valamint a sebgyógyulást elősegítő tulajdonságokkal rendelkezik.

Az Esteem™ zsákoknál használt tapadó felület (Stomahesive®) egy speciális hidrokolloid, melynek köszönhetően a zsák kíméletesen, de biztosan tapad a bőrre.

Az Esteem™ zsákok tapadó felületében található Stomahesive® anyag biztosítja:

- a zsák bőrre történő felhelyezésekor a biztos tapadást,
- használat során a hosszan tartó, biztonságos tapadást és
- a sztóma körüli bőrhiány és irritáció gyógyulását.

A szabályos kerek, ovális vagy szabálytalan alakú sztómákhoz kialakított milliméter skálájú kivágási útmutató megkönnyíti a zsák kivágását annak érdekében, hogy jól illeszkedjen a sztómához.

A kivágási vonalak tollal megrajzolhatóak. Az Esteem™ zsákok teljeskörű méretválasztéka biztosítja az illeszkedést bármely sztómához.

Használat során a megfelelő borítás, valamint a zsák alakja biztosítja a maximális komfortérzetet.

Az Esteem™ zsákok borításához használt anyag kellemes tapintású, emellett erős és tartós, így a zsákok tartósak és egyben kényelmesek is.

A zsák széleinek lekerekített és sima felülete nem irritálja a bőrt.

A jól kialakított fülek köszönhetően könnyű a fedőpapír eltávolítása.

